

# Klebstoffentferner • Bonding Resin Remover • Fraise pour le retrait d'adhésifs

Zum Entfernen von Bracketkleber nach der Entbänderung

For trimming off bracket bonding resin after removing the bands

Nouveaux instruments en carbure de tungstène pour éliminer en douceur les résidus d'adhésif après retrait des «brackets»

Praxis • Dental Surgery • Cabinet dentaire




- Lieferbar in den Schaftarten FG und RA. Dadurch wird der Einsatz im roten Winkelstück und im Micromotor möglich.
  - Die spezielle Verzahnung entfernt den Kleber ohne den Zahn dabei zu verletzen.
  - Die Sicherheitsfase am Verzahnungsende reduziert die Gefahr von Riefen in der Schmelzoberfläche.
  - Die unterschiedlich langen Verzahnungen erleichtern die Bearbeitung von kleinen und großen Flächen.
  - Die verzahnungsfreie Spitze vermeidet Verletzungen des Gingivalsaums.
- GK = glatte Kuppe (Glatzkopf)  
 A = schräge Verzahnung  
 L = langes Arbeitsteil


- Available with FG and RA shanks for use in red contra-angles and micromotors.
  - The special blades remove the resin without injuring the tooth.
  - The safety bevel at the end of the blades reduces the risk of cutting striations in the enamel surface.
  - The various lengths of blade simplify trimming smaller and larger areas.
  - The safe-tip prevents injury to the gingival margin.
- GK = Smooth rounded tip  
 A = Angled Toothing  
 L = Long working section

- Disponibles en tige turbine FG et en contre-angle CA.
  - Les lames spéciales éliminent la colle sans attaquer l'émail.
  - Le chanfrein de sécurité en bas des lames réduit le risque de rayer l'émail.
  - Les longueurs différentes des parties travaillantes permettent de traiter les petites et les grandes surfaces.
  - La tête arrondie et lisse (non-coupante) évite de léser le rebord gingival.
- GK = Bout arrondi et lisse (non-coupant)  
 A = Denture inclinée  
 L = Partie travaillante longue


## H22GK (217)



Größe/Size/taille ø 1/10 mm	016
Länge-Length in mm - longueur	4,7
Shank   	
FG 500 314 217 001 ... <b>H22GK- ... -FG</b>	<b>016</b>
opt. 160.000 rpm	

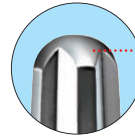

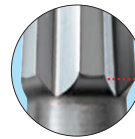


Glatte Kuppe GK  
 Smooth rounded tip  
 Bout arrondi et non-coupant



Sicherheitsfase  
 Safety chamfer section  
 Chanfrein de sécurité

## H22AGK (217)

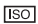




Größe/Size/taille ø 1/10 mm	016	016
Länge-Length in mm - longueur	4,7	4,7
Shank   		
FG 500 314 217 006... <b>H22AGK- ... -FG</b>	<b>016</b>	
RA 500 204 217 006... <b>H22AGK- ... -RA</b>		<b>016</b>
opt. FG 160.000 rpm, RA 30.000 rpm		



Abtrag von Klebstoffresten mit dem Klebstoffentferner.  
 Removal of adhesive residue with the Bonding Resin Remover.  
 Retrait de résidus adhésifs.

## H22ALGK (219)



Größe/Size/taille ø 1/10 mm	016	016
Länge-Length in mm - longueur	8,0	8,0
Shank   		
FG 500 314 219 006... <b>H22ALGK- ... -FG</b>	<b>016</b>	
RA 500 204 219 006... <b>H22ALGK- ... -RA</b>		<b>016</b>
opt. FG 160.000 rpm, RA 30.000 rpm		